

# "大きな車いす" あります!

モジュラー車いす M4(エム フォー)

従来の車いすにはないサイズ・強度と、使いやすさを備えています。


- ・ 体格の大きなユーザー向けの車いす
- ・ 最大座幅:58cm 耐荷重:160kg



Quality for life

# 大きくても、使いやすい！

- ・ M4は、日常生活での使いやすさも考慮されています。
- ・ フットサポートはスウィングイン・アウト、取り外しが可能。
- ・ アームサポートのはね上げ、高さ調整が可能。
- ・ 高いフレーム剛性により、「座りやすさ」「動かしやすさ」も備えています。

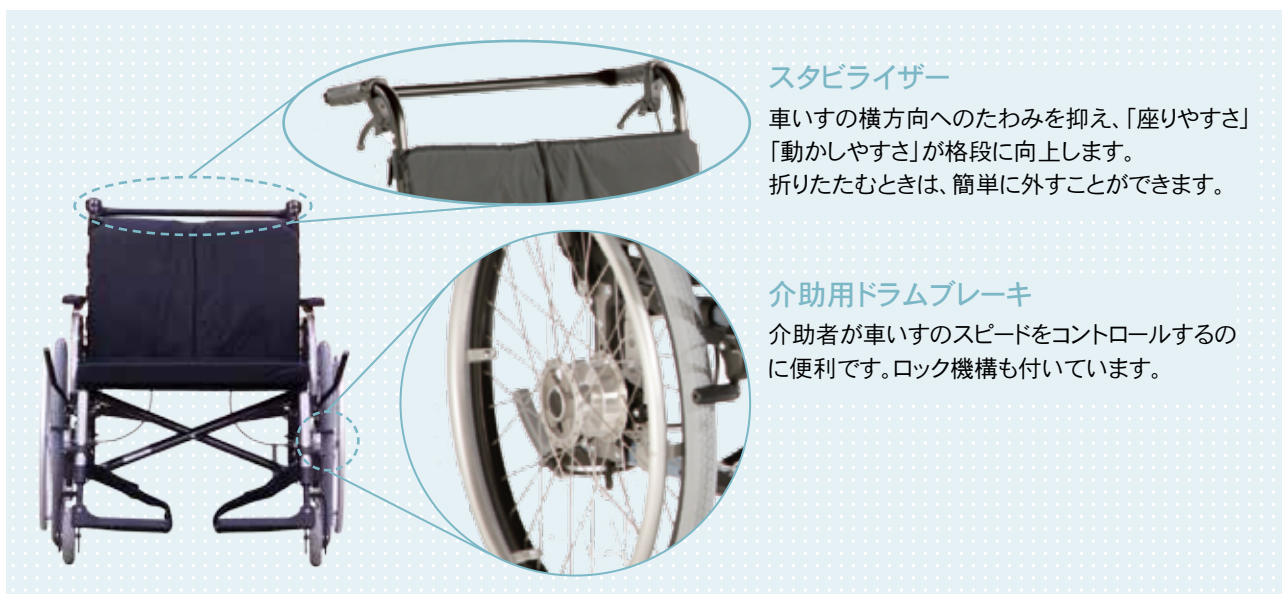

## スタビライザー

車いすの横方向へのたわみを抑え、「座りやすさ」「動かしやすさ」が格段に向上します。折りたたむときは、簡単に外すことができます。

## 介助用ドラムブレーキ

介助者が車いすのスピードをコントロールするのに便利です。ロック機構も付いています。

## テクニカルデータ

座幅	45.5cm / 48cm / 50.5cm / 53cm / 55.5cm / 58cm (選択)
座奥行	43cm / 46cm / 49cm (調整可能)
前座高	40cm - 51.5cm (キャスターのサイズにより、調整範囲が変わります)
後座高	37.5cm - 50cm (ホイールのサイズにより、調整範囲が変わります)
バックサポートの高さ	40cm / 42.5cm / 45cm / 47.5cm
耐荷重	160 kg
重量	約19kg (介助用ドラムブレーキ装着時)
全幅	72cm (座幅50.5cmの場合)
フレームカラー	シルバー

## モデル仕様価格 242,400 円

( 2枚式フットパネル / 介助用ドラムブレーキ / キュービックフォーム クッション )

お問い合わせ先