

Ventus (ベントス)

リジッド モジュラー 車いす

折りたたみ式の車いすから固定フレームに乗り換えたいとお考えの方、
剛性の高い車いすをお探しの方に・・・
ダンスにスポーツにそして日常生活をエンジョイするために・・・

基本価格155,000円～のリジッド式モジュラー車いすはいかがですか？

Quality for life



Ventus (ベントス)

リジッド式車いす... 欧米では定番となっている車いすの一種

仕様

重量	10.4kg～
耐荷重	100kg
座幅	28cm～44cm (2cm刻み)
座奥行	30cm～50cm (2cm刻み)
前座高	45cm～54cm (1cm刻み)
後座高	33cm～53cm (1cm刻み)



[小さい方向け仕様]

固定車(リジッドタイプ)の車いすのメリット

こんなところが良い

剛性があるため、漕ぎ出しが軽く、減速しないで転がる

折り畳み式の車いすに比べて軽量

キャンバー角を付加することで、スポーティな車いすとして使用できる

座布のたるみが無く、姿勢が安定しやすいまた、長時間座っていても疲れにくい

部品点数が少ないので、故障、破損の頻度が少ない

車いすの調整がしやすい

こんな方、こんな場所...にお勧め

自宅での仕事や家事、または、職場で長時間就労される方に室内用など2台目の車いすとして

学校や家庭で活動的に生活したいお子様やスポーツ用の車いすをお探しのお様に

主に車いすで毎日生活される方に

長期間車いすをお使いになりたいとお考えの方に(丈夫で壊れにくい車いす)

ダンスやテニスなど趣味の範囲を広げたい方に

固定車を使用した生活(自動車への格納の際の)の留意点

購入前に、自家用車への積み込み方法、サイズの確認をされることをお勧めします。

タクシーなどで移動される際のトランクへの積み込み方法(分解、組立)を介助される方と一緒にご確認ください。

フレームカラー(全14色)



キャンディレッド



スパークルオレンジ



レッドパープル



グラニースミス



マリンブルー




スカイブルー



アイスブルー



ホワイトパール

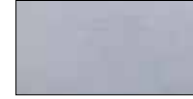


プリザントシルバー



チャコールブラック



マットブラック

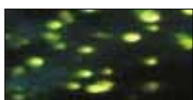

グリーンラーメン



ブラック

お問い合わせ先

車いす、座位保持装置、歩行器
などの専用サイト

www.ms.ottobock.jp

皆様のアクセス、お待ちしております。